

「酸素をしっかりと取り込めているか」

酸素飽和度・脈拍数・灌流指標を8秒で測定！

管理医療機器

医療機器認証番号：303AGBZX00047000

ワンタッチ操作ですぐに測定

パルスオキシメータ

PULSE OXIMETER

今までは病院でしか測ることのなかった
血液中の酸素濃度。

息苦しさなどの体の不調を感じた時に。
不安を安心に変える一つの指標として、
これからは一家に一台、新習慣に。



酸素飽和度



脈拍数



灌流指標



日本の厳しい認証審査をクリアした医療機器だからこそその高品質・高機能

安心

安全

簡単

高精度

パルスオキシメータとは

- 皮膚を通して動脈血酸素飽和度 (SpO₂) と脈拍数を測定するための装置です。本製品は、灌流指標も測定します。
- 肺から酸素をしっかりと取り込めているかを測ることができます。

パルスオキシメータの必要性

誰もが新型コロナウイルスの感染リスクを抱えている今、家庭でも職場でも早期に呼吸状態の悪化を見落とさないようにする必要があります。また、新型コロナウイルス感染後の重症化の目安として活用できます。そこで最近注目されているのが「パルスオキシメータ」です。傷みなく簡単に体内の酸素の状態がわかる医療機器です。毎日の健康チェックの習慣化にお役立てください。

使いやすさ・便利さにこだわった6つの特長

- 指にはさむだけの簡単操作
- 指を抜くと自動で電源 OFF
- 暗い場所でも見やすい有機 EL ディスプレイ
- 持ち運びに便利な軽量小型ボディ
- 本体を衝撃から守る透明シリコンケース付き
- ストラップ&収納ポーチ付き



痛みなく簡単に体内の酸素の状態が分かります。今や一家に一台の必需品です。


ご利用シーン



- 新型コロナウイルス感染症対策として毎日の体調管理に
- 呼吸器の疾患がある方に
- 急に進行する肺炎の症状を把握するために
- スポーツ時のコンディショニングチェックに
- 登山時の高山病予防に
- 在宅介護やご高齢の方の体調チェックに

医療・介護の現場でもお使いいただいております。

測定値の表示について

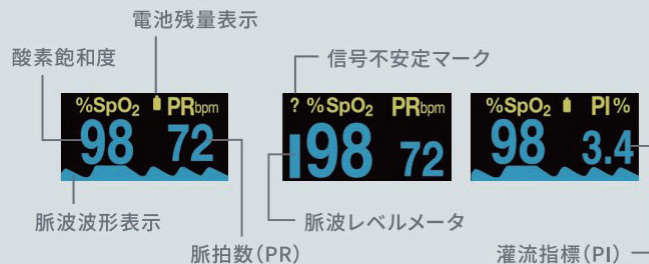

- **酸素飽和度**
血液中の酸素濃度を表示します。
- **脈拍数**
1分間に心臓が拍動する回数を表示します。
- **灌流指標**
血液の末梢循環状態を表示します。
- **脈波レベルメータ**
脈波に同期して脈波の強度レベルを表示します。
- **脈波波形表示**
酸素飽和度測定に際して得られる脈波波形を表示します。

- 本体
- シリコンケース
- ストラップ
- 収納袋
- お試用単4形アルカリ乾電池 2本
- 取扱説明書
- 添付文書

〈セット内容〉



仕様

販売名	パルスオキシメータ KA200	電撃保護	内部電源機器
一般的名称	パルスオキシメータ	装着部の分類	BF装着部
医療機器分類	管理医療機器/特定保守管理医療機器	IP保護等級	IP22
医療機器認証番号	303AGBZX00047000	電源	単4形アルカリ乾電池×2本
酸素飽和度測定機能	測定精度: ±2%(70%~100%)	寸法	約60(長さ)×32(幅)×30(高さ) mm
	測定範囲: 70%~100%	質量	約46g(乾電池を含む)
	必要条件: 69%以下でないこと	使用環境温度	5~40°C
脈拍数測定機能	測定精度: ±2bpm (25bpm~99bpm)	使用環境湿度	15~93%
	±2% (100bpm~250bpm)	保管条件	-25~70°C
	測定範囲: 30bpm~250bpm		湿度≤93%(結露なし)
灌流指標測定機能	測定精度: 測定値の±0.2 (0.2%~1.0%)		気圧70~106kPa
	±20% (1.1%~20.0%)		
	測定範囲: 0.2%~20.0%		

MADE IN CHINA

※患者の状態に関する臨床判断は、本製品の情報だけでなく、臨床症状や他の検査結果と合わせて総合的に行ってください。
※ご使用の際は取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

コンセプト

CONCEPT

「安心」「安全」「簡単」「高精度」

世界中でコロナウィルスの感染が拡大している今、体温や酸素飽和度の測定は、日々の健康管理に欠かせないものとなりました。誰もが迷うことなく直感的で、簡単に使えるわかりやすさを追求しました。体調の良くないときでもストレス無く使うことが大切だと考えているからです。

信頼性

RELIABILITY

医療機器に関する品質マネジメントシステムの規格であるISO13485の認証を取得した製造所で生産しており、日本の医療機器認証を取得しています。欧州での医療機器販売に必要なCEマークも取得しており、信頼の品質をご提供します。

デザイン理念

DESIGN PHILOSOPHY

白を基調としたシンプルで清潔感のあるカラーは、私たちの届けたい優しさを表現しています。よくあるカラフルな色使いではなく、こころが落ち着く、シンプルなデザインです。

製造販売元: KAEI株式会社
大阪市中央区南船場2-4-8
Tel: 06-6940-4085
Email: info@kaei.co.jp

販売代理: 株式会社MDTジャパン
広島市中区上八丁堀5-25
Tel: 082-502-6907
Email: mdt-staff@mdt-japan.com



mdt-japan.com